

メタボリックシンドローム セルフチェック

■標準的な健診プログラムに 沿った問診項目

氏名	性別	年齢	職業
〒	市町村	番	号
検査項目	検査結果	検査結果	検査結果
1. 肥満	2. 高血圧	3. 高血糖	4. 脂質代謝異常
5. 肝機能異常	6. 腎機能異常	7. 尿酸値	8. その他

■生化学血液検 14 項目査

- 糖代謝
血糖値／HbA1c
- 脂質代謝
総コレステロール／
中性脂肪／
HDL- コレステロール／
LDL- コレステロール
- 肝機能
GOT／GPT／ γ -GTP
- 腎機能
尿素窒素／クレアチニン
- その他
尿酸／総タンパク／アルブミン




腹囲測定用
メジャー同梱

■分かりやすい解説つきの 検査結果シート

過去の検査結果と
比較が可能

メタボリックシンドローム
の判定

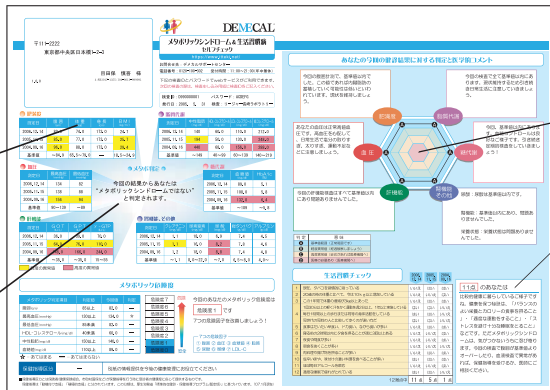

生活習慣の改善方法を
アドバイス

点数表示と
わかりやすい解説

メタボリックシンドローム
判定項目に加えて、
生活習慣病も検査できます。

※内容は予告無く変更する場合があります。

ご利用の際の主なご質問

Q1. 針は痛くないですか？

- 少しチクッとする程度。刺すというよりはつつく感じです
- 小児(小学校低学年〜)生活習慣病教室でも利用されていますが、泣き出すお子さんはいません。お母さんも安心です。

Q2. 病院の検査と同じ結果？ 信頼できるの？

- 静脈血と指先血の相関テストを繰り返し、精度保証できるものを商品化しています。
- 生命保険5社が精度チェックの上、高額保険の加入診査に利用
- 多数の健保自治体で採用されています

Q3. 一人では難しい？ 失敗したときは？

- わかりやすい写真付の取扱説明書がついています。
- 3〜5分で完了します
- 初めての方で失敗する方は3%くらいいます。
この場合、無料で新しいキットを再送します。
失敗の原因・対策の説明文書を同封します。

Q4. 血液検査で食事の影響は？

- 病院で行う健康診断の際の注意と同じです。
- 生化学検査では食後3時間は空けてから採血、できれば朝食前。
- 腫瘍マーカー検査では食事の影響はありません。

Q5. どんな検査ができるの？

- 生活習慣病(生化学検査)
- 腫瘍マーカー検査(がんスクリーニング検査、ピロリ菌ほか)
- 感染症(B・C型肝炎、H I V)
生活習慣病40%、腫瘍マーカー50%、感染症10%くらいです。

Q6. 病院で検査の方が安くない？

- 健康診断は保険が適用されません(自由診療)。
初診料・技術料・検査料・診断料。また、1日で結果は出ませんので
結果確認のための再診が必要となります。1万円くらいは必要です。
- 予約手続き、またされる、交通費などもかかります
- 検診受診率の平均は30%くらい、ほとんどが費用負担なしで利用
できますが、受けない方が70%いるということです。
お金の問題ではないようです。

Q7. 血のついたゴミはどうするの？

- 血液検体と一緒に返送してもらいます。
- 検査センターで医療廃棄物の処理をします。
- ご家庭に血のついたゴミはのりません。

Q8. 検査結果はどの位でわかる？

- メールで3営業日、結果シートで7営業日くらいです
- 一般的な健康診断の結果は2週間〜1ヶ月ほどかかります

DEMECAL® 血液検査キットのご案内

- ☐ 自宅で、自分でカンタンに血液チェック
- ☐ 安定した検査精度
- ☐ 生活習慣病、腫瘍マーカー、感染症



株式会社リージャー製

販売代理店



ボディプランニング株式会社

営業本部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-5-4 大塚ビル2F
TEL 03(5510)2361
FAX 03(5510)2363
http://www.body-planning.com/

取次代理店



株式会社ミカタ・クリエイト


営業本部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-5-4 大塚ビル3F
TEL 03(3593)3028
FAX 03(3593)3029
http://www.mikata-create.jp/

オンラインショップ 「ミカタマーケット」で検索!!
(http://shop.mikata-create.jp/)

デメカル血液検査サービス

デメカル血液検査サービスとは、デメカル血液検査セット及び付帯するサービスをもって構成されます。

血液検査キット

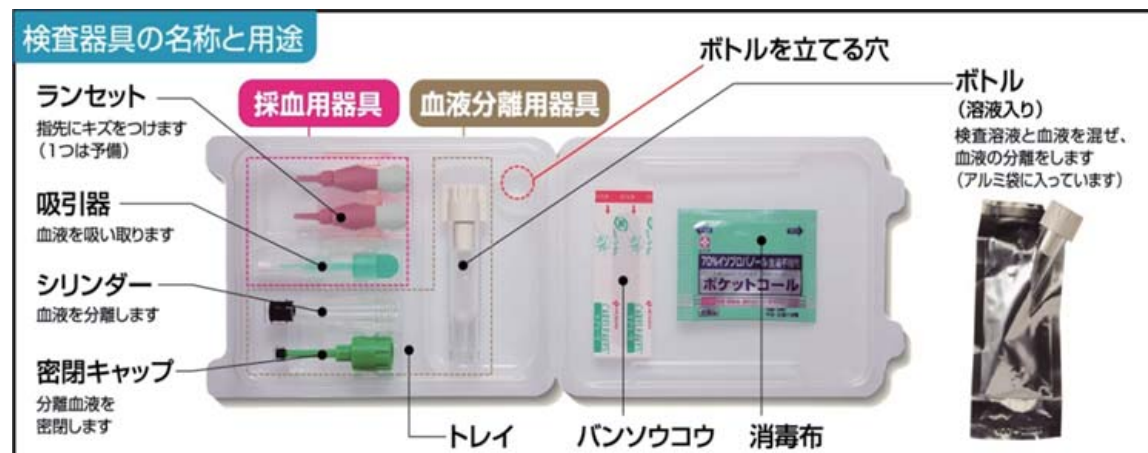

商品ラインアップ

生化学血液検査



感染症検査



腫瘍マーカー検査



検査項目

●生化学的検査

TP (総タンパク) / ALB (アルブミン) / AST (GOT) / ALT (GPT) / γ -GTP / BUN (尿素窒素) / Cre (クレアチニン) / TC (総コレステロール) / TG (中性脂肪) / HDL-C (HDLコレステロール) / Glu (血糖) / UA (尿酸) / HbA1c (グリコヘモグロビン) / LDL-C (LDLコレステロール)

●ウィルス感染症検査

HIV抗体 / HCV抗体 / HBs抗原

●腫瘍関連検査


CEA / AFP / CA19-9 / CA125 / PSA

●免疫学的検査

フェリチン / ヘリコバクターピロリ抗体 / 高感度CRP / p53抗体 / ペプシノゲン (生化学的検査)

サービスの特長

- デメカル血液検査は、リージャーが開発した「自己採血による超微量血液検査」です。
- 日本初の“即時血漿分離方式”です。郵送が可能となり、安定した検査精度を保つことができます。
- 指先からわずか2・3滴 (0.05cc) の血液で、医療機関 (10cc) と同等の検査精度。
- 自宅や職場でわずか5分あまり、検査のためにお休みを取る必要はありません。
- 検査は登録衛生検査所で行われ、検査結果は約1週間でご確認いただけます。
- 検査項目は生活習慣病、腫瘍マーカー、感染症など豊富です。
- 個人情報保護 (プライバシーマーク取得)、デメカルサポートセンターなどの安心サービス体制

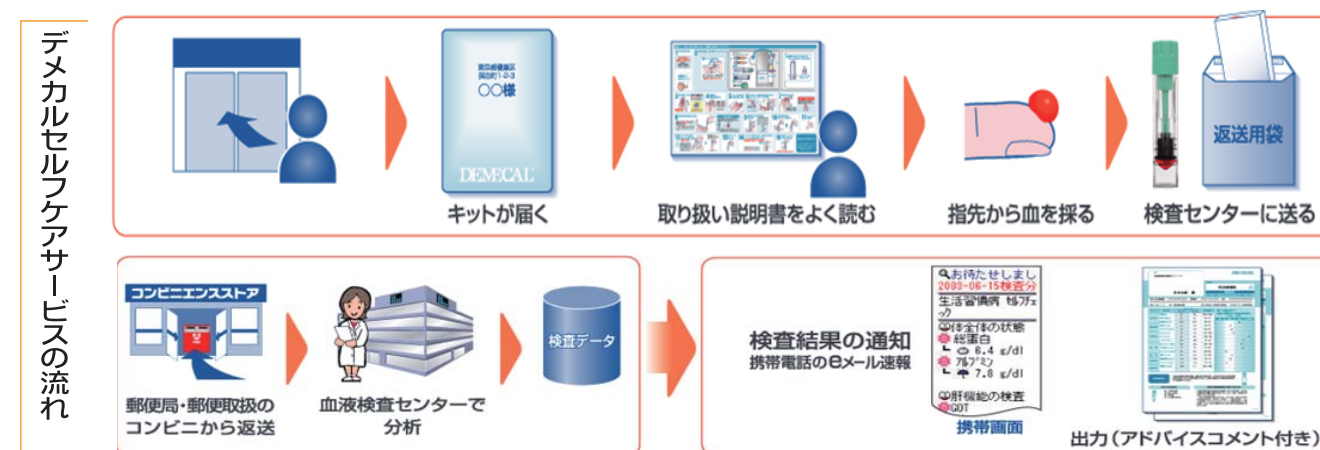


DEMECAL検査の主なご利用先

〔健康保険組合〕在宅血液検査 (腫瘍マーカー検査) 〔自治体〕B型・C型肝炎検査 (保健所事業の補完)
〔保険会社〕高額契約加入時の血液検査 〔スポーツクラブ〕会員の健康増進
〔クリニック〕眼科・白内障術前検査 / 歯科・インプラント術前検査etc 〔震災支援〕東日本大震災被災者支援

サービスのバックボーン

少量の血液で検査ができる

リージャー方式では採血量は末梢血で一滴、約50 μ l (0.05ml) の血液を溶液中に落とし攪拌後、濾過膜付きシリンダーで押すだけで、血漿分が出来ます。今、世界で、微量の血液を常温・常圧で血漿分離する方式はリージャー固有のテクノロジーです。

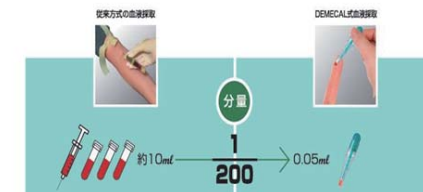

!CDC承認



!輸送時の安定性と高精度の確立

リージャーが開発した即時血漿分離デバイス。採血後即時に血液を分離することで、輸送時の検体の安定性を確保。分析には一般の血液検査室で使用される信頼性のある測定機を使用。即時血漿分離デバイスと微量血液による定量的分析法と言う特許技術が確かな精度のバックボーンとなっています。

!DEMECAL専用検査ラボ・精度管理



デメカル・ヘルスケア・リサーチセンター
山梨県笛吹市春日居町小松855-24

